

POLSKI

Advanced Bleeding Control™

Gaza urazowa

WOUNDCLOT™

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

POLSKI

ROZPUSSZCZALNA GAZA HEMOSTATYCZNA

Wyrób sterylny

Opis: WoundClot™ to rozpuszczalna gaza o strukturze opartej na celulozie. Jest w pełni kompatybilna biologicznie i dostarczana w stanie sterylnym. W kontakcie z płynami tworzy przylegający żel, który pęcznieje i przywiera do rany, zapewniając kontrolę krwawienia.

WOUNDCLOT™

Gaza urazowa

Advanced Bleeding Control™

INSTRUKCJA UŻYWANIA –

WYRÓB URAZOWY (CE)

RATUNKOWY OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY

Do umiarkowanych i ciężkich krwotoków urazowych

Wyrób sterylny


Rozmiar produktu: 10 x 10 cm (4 x 4”), 8 x 20 cm (3,1 x 8”), 8 x 100 cm (3,1 x 39”), 20 x 30 cm (8 x 12”) **Wskazania:** Gaza urazowa WoundClot™ jest przeznaczona do tamowania krwawień z ran urazowych, w tym do opanowywania krwotoków o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. **Do użytku przez przeszkolony personel ratowniczy. Zastosowanie:**




Otworzyć opakowanie i wyjąć gazę urazową WoundClot™.




Trzymać za szpiczasty koniec.

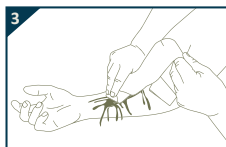

Delikatnie umieścić gazę w ranie i pozwolić jej nasiąknąć krwią, jednocześnie lekko dociskając, aby zapewnić bezpośredni kontakt gazy z miejscem krwawienia.

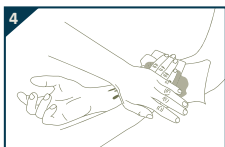

W razie potrzeby delikatnie umieścić kompres lub bandaż uciskowy na gazie urazowej WoundClot™, aby zabezpieczyć ją na miejscu do momentu podjęcia dalszego leczenia.

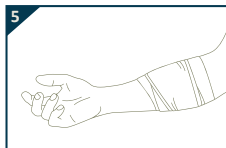

Jeśli krwawienie nie ustaje, usunąć opatrunek i powtórzyć kroki 1–4.

Usuwanie: Po osiągnięciu hemostazy usunąć gazę, obficie nasączając ją wodą lub roztworem soli fizjologicznej, a następnie delikatnie usunąć z rany jej nadmiar.

Środki ostrożności: Przed użyciem wyrobu WoundClot™ zaleca się przemyć rany wodą. Krwawienie nie zawsze ustaje natychmiast. Jeśli krwawienie się utrzymuje, upakować dodatkową warstwę gazy i kontynuować wywieranie delikatnego, stałego ucisku.



Nie sterylizować повторно



Gaza WoundClot™ stanowi wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie.



Sprawdzić w instrukcji używania

STERILE R

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania



System pojedynczej bariery sterylniej z opakowaniem ochronnym wewnątrz



Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Sterylność zawartości jest gwarantowana, chyba że pojedyncze opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte.



CORE
SCIENTIFIC
CREATIONS



Nie używać po upływie daty ważności.

Rx Only

Wyłącznie na receptę



Przechowywać w miejscu suchym

LOT

Kod partii

REF

Numer katalogowy

MD

Wyrób medyczny

UDI

Niepowtarzalny identyfikator wyrobu



Producent

5°C
41F

35°C
95F

CE 0483



Producent: Core Scientific Creations Ltd.

Biuro: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Izrael

Zakład produkcyjny: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Izrael.

Tel.: +972-3-7359555 | Faks: +972-3-7359544

info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Niemcy

CH REP

MedNet Swiss GmbH

D4 Platz 4, 6039 Root D4, Szwajcaria

Importer: Integra Medical sp. z o.o.

Importer Address: Truskowskiego 52,

31-352 Kraków, Poland

NIP: 677-240-82-53

SRN: PL-IM-000047905

Website: www.integramedical.eu