


WOUNDCLOT™ SURGICAL



Wprowadzenie WoundClot™ Surgical

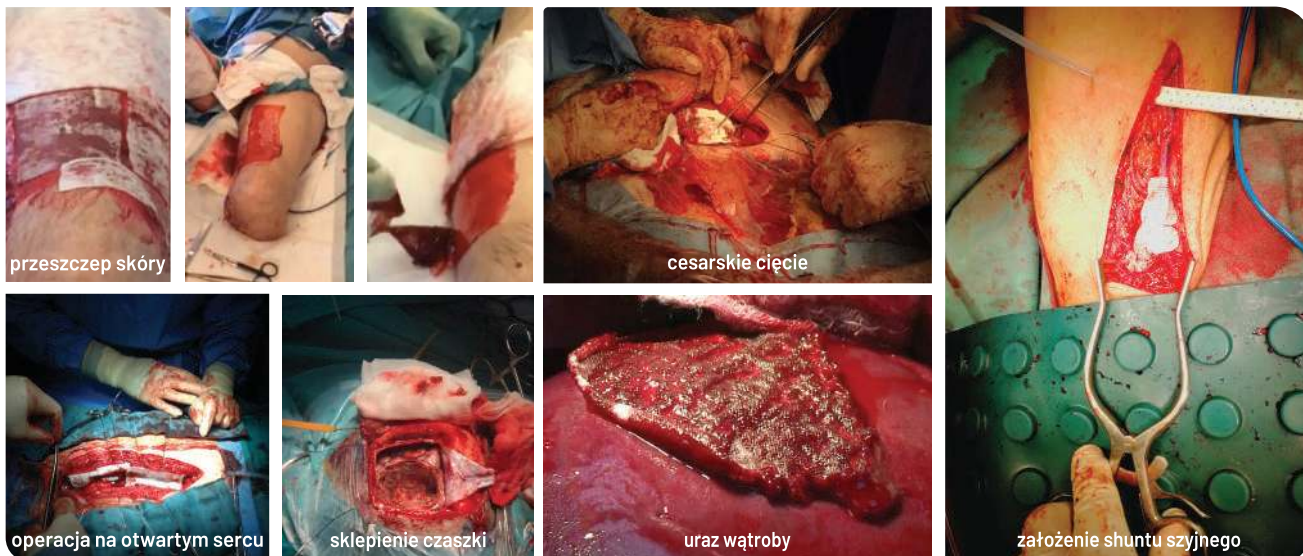

Wprowadzenie WoundClot™ Surgical

WoundClot™ Surgical to rewolucyjny, chirurgiczny opatrunek hemostatyczny klasy CE III, przeznaczony do kontroli krwawień okołoperacyjnych i pooperacyjnych. Po kontakcie z krwią WoundClot™ przekształca się w unikalną, opatentowaną trójwymiarową matrycę żelową.

- Zapewnia szybkie i stabilne zatamowanie krwawienia, poprzez rozszerza się i mocno przylega do rany oraz otaczających tkanek – nawet przy krwawieniu pod wysokim ciśnieniem.
- Absorbuje do 25 razy więcej krwi niż wynosi jego początkowa masa i pozostaje skuteczny w ranie nawet przez 24 godziny.
- Działa bez konieczności stosowania manualnego ucisku.
- Aktywuje czynniki krzepnięcia, zatrzymując krwawienie włóśniczkowe, żyłne i tętnicze.

Korzyści dla pacjenta

WoundClot™ Surgical poprawia wyniki leczenia chirurgicznego.

- Zmniejsza lub eliminuje potrzebę stosowania drenów oraz transfuzji krwi.
- Wysoki profil bezpieczeństwa – hipoalergiczny, bez przeciwwskazań i bez toksyczności.
- Skuteczny u pacjentów z koagulopatią oraz u osób stosujących terapię przeciwwątrobową lub przeciwpłytkową.
- Łatwy do usunięcia, powoduje minimalny ból i minimalne uszkodzenia tkanek.

Korzyści dla personelu chirurgicznego i medycznego

WoundClot™ Surgical oszczędza cenny czas zespołu operacyjnego.

- Łatwy w użyciu – nie wymaga stosowania ręcznego ucisku.
- Chroni i tamuje krwawienie nawet do 24 godzin.
- Łatwy do usunięcia z rany, nie powoduje ponownego krwawienia; może pozostać w miejscu aplikacji.

Świetny dla organizacji ochrony zdrowia

WoundClot™ Surgical pomaga placówkom medycznym osiągać ich cele.

- Wymaga minimalnego przeszkolenia.
- Certyfikowany jako wyrób medyczny klasy CE III.
- Pięcioletni okres ważności.
- Zmniejszenie potrzeby transfuzji skraca czas hospitalizacji pacjenta i obniża ryzyko infekcji.

Jak działa WoundClot™ Surgical?

W miejscu aplikacji WoundClot™ Surgical po kontakcie z krwią – dzięki intensywnemu wchłanianiu – jego unikalna struktura celulozowa przekształca się w grubą, wytrzymałą błonę żelową, która rozszerza się i przylega do powierzchni rany.

WoundClot™ Surgical nie wymaga stosowania ręcznego ucisku, dzięki czemu personel chirurgiczny może skupić się na innych czynnościach.

Jest wyjątkowo chłonny – wchłania do 25-krotności swojej początkowej masy płynu – i pozostaje aktywnie absorbujący w ranie nawet przez 24 godziny.

WoundClot™ Surgical działa poprzez wiele mechanizmów: szybkie wchłanianie krwi, przyleganie i rozszerzanie się w ranie, agregację płytek krwi, erytrocytów (RBC) i czynników krzepnięcia oraz aktywację czynników XI i XII.

WoundClot™ Surgical sprawdza się na różnych typach tkanek i w złożonych ranach, w tym w przypadku naczyń krwionośnych, narządów wewnętrznych, kości oraz skóry.

Jak usunąć opatrunek WoundClot™ Surgical?

WoundClot™ Surgical jest biodegradowalny – proces biodegradacji trwa od 7 do 10 dni.

Alternatywnie, WoundClot™ Surgical można łatwo usunąć z rany bez powodowania ponownego krwawienia.

- Delikatnie odklej WoundClot™ Surgical z miejsca aplikacji.
- Usuń skrzep.
- Przepłucz obszar solą fizjologiczną lub wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości z rany.

Jakie inne cechy są unikalne dla WoundClot™ Trauma?

- **Innowacyjna, nieutleniana i nieregenerowana struktura celulozowa (NONRCS)**
Mniejsze ryzyko reakcji zapalnej, szybsze gojenie, brak konieczności usuwania materiału z rany.
- **Nie powoduje egzotermii**
Nie wywołuje nagrzewania się rany ani degradacji skrzepu.
- **Nie powoduje podrażnień**
Nie wywołuje reakcji alergicznych ani podrażnień skóry.

WoundClot™ Surgical jest dostępny w następujących rozmiarach:

KOD	Nazwa
102211101	WoundClot™ Surgical 10 cm x 10 cm (4" x 4")
102222101	WoundClot™ Surgical 2.5 cm x 2.5 cm (1" x 1")
102255101	WoundClot™ Surgical 5 cm x 5 cm (2" x 2")
102257101	WoundClot™ Surgical 5 cm x 7.5 cm (2" x 3")



SURGICAL



HEMODIALYSIS



VET



TRAUMA



OTC

EVERY
DROP IS
PRECIOUS™



www.woundclot.org